

HISCL™ 検体希釈液

【使用法】

本品は調製済みですので、そのまま使用してください。
初回のみ、試薬容器前部の爪を押しながら容器ケースを完全に押し下げてください（アルミシールが破れて開栓されます）。
開栓後の有効期間は90日です。
使用する装置の取扱説明書に従い、試薬容器を装置にセットしてください。各キットの添付文書に記載されている内容に従って操作してください。



【使用上又は取扱い上の注意】

1. 本品は1%BSAを含むトリエタノールアミン緩衝液(pH7.5)です。各キットの添付文書に、本品が指定されている場合に限り使用できます。
2. 本品はアジ化ナトリウムを含有していますが、法的には毒物として取り扱われる濃度ではありません。アジ化ナトリウムは、鉛、銅などと反応して爆発性の化合物を生成する危険性があります。また、次亜塩素酸などと反応して、有害なガスを発生する恐れがありますので、廃棄の際には、大量の水と共に流してください。また、誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法：2～8℃に保存
有効期間：12カ月（使用期限は、外箱に表示しています。）

* 【製造販売元】

シスメックス株式会社

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 〒651-0073
TEL(078)265-0500(代)

[REF]	カタログ番号	*
[IVD]	体外診断用の専用製品	
	製造販売元	
	添付の文書参照	**
	保存温度	
	使用期限	
[LOT]	ロット番号	

HISCL™ Diluent

PRODUCT NAME

HISCL™ Diluent

INTENDED PURPOSE

For dilution of samples measured with each assay kit.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. This reagent can be used only when specified in the package insert for each assay kit.
2. This reagent contains sodium azide.
Since sodium azide reacts with lead tubing and copper tubing to generate metal azide which can explode, use a large quantity of water when disposing of it. In case of contact with the eyes, mouth, or hands, carry out emergency treatment such as washing with a large quantity of water. If necessary, consult a physician or follow in-hospital infection manual.

PROCEDURE

1. First of all push down the outer case of the reagent container firmly to tear the aluminum seals on the inner bottle.
2. Set the container at the indicated position in the analyzer.
3. Carry out procedures according to the package insert for each assay kit.

STORAGE AND SHELF LIFE AFTER OPENING

Store at 2-8°C. The shelf life is 90 days after opening.

MANUFACTURER

Sysmex Corporation
1-5-1 Wakino-hama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan


AUTHORISED REPRESENTATIVES

Asia-Pacific: Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735

DATE OF ISSUE OR REVISION

08/2020

Printed in Japan

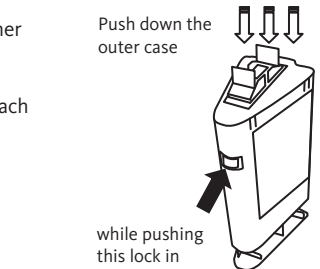

[REF]	Catalogue number
[IVD]	In vitro diagnostic medical device
	Manufacturer
	Consult instructions for use
	Temperature limitation
	Use by
[LOT]	Batch code